



Comfiwave®

Kompressionsbandage til at sove med



Hvad er *Comfiwave*®?

Comfiwave er en patenteret kompressionsbandage, der er designet til at supplere det kompressionsprodukt, en patient bruger i dagtimerne.

Comfiwave giver et kompressionstryk på **15-21 mmHg**.

Nem på- og aftagning giver Comifwawe en innovativ alsidighed, da den giver kompression om natten og er en behagelig løsning til afslapning om dagen.



Til nattetimerne

Kronisk ødem går jo ikke i sig selv i løbet af natten og kompressionsbandager lavet til dagsbrug er ikke optimale at sove med om natten.

Fortsæt på behageligeste vis kompressionbehandlingen om natten med Comfiwaves bløde og åndbare stof, der giver skånsom kompression, mens du sover.



Til når som helst

Comfiwave-bandager er produceret med patenteret højelastisk garn, hvilket gør dem nemme at tage af og på. -altså perfekt til afslapning i løbet af dagen.

Stoffets åndbarhed betyder, at Comfiwave er egnet til brug året rundt, da den er køligere at have på end traditionelle kompressionsprodukter.

s. 10



s. 12



s. 14



s. 18



s. 20



s. 22



Ud-i-et-strikketeknologi

Comfiwave-bandager til underekstremiteterne er produceret med en høj grad af stabilitet i ankelområdet. Den er tilpasset ankels anatomi for at hindre, at den genererer henover anklen.

Det laterale og mediale tåområde er strikket, så det kan strækkes mere, hvilket kan forhindre tryksår.

Comfiwave's unikke strikning i bæk og bølge masserer ødemet og efterlader det med afmærkninger, hvilket blødgør vævet.



Comfiwave® fakta



Nem at tage af og på

Patenteret strik med høj elasticitet gør det nemt at tage Comfiwave på og af.



Fremstillet af blød, ufarvet bomuld

100 % bomuld mod huden og et sømløst design sikrer maksimal komfort.



Åndbart materiale

Comfiwaves bølgemønster sikrer høj luftgennemstrømning, som virker kølende og giver stræk.

Comfiwave[®] funktioner



Giver pålidelig kompression om natten

Supplerer den kompressionsbehandling, patienten får i dagtimerne



Kan anvendes til palliativ behandling



Kan anvendes under easywrap eller bandage



Jeg er vild med denne bandage. Jeg har haft den på om natten i den sidste uge og det har gjort en enorm forskel!

- Lymfødempatient

Virkelig behagelig at have på om natten. I modsætning til andre produkter gør den ikke mit ben varmt ved høje temperaturer. Nem at tage af og på. Fremragende produkt

- Lymfødempatient

“ Patienter fortæller, at Comfiwave var behagelig og nem at bruge, hvilket i sig selv vil forbedre compliance og selvkontrol af ødemet. ”

“ ...denne type produkt kan bruges alene eller som supplement til andre kompressionsprodukter og døgnet rundt om nødvendigt. ”

Download
kliniske casestudies
og artikel

www.comfiwave.info

British Journal of
Community Nursing

PRODUCT FOCUS

Circumference (cm)	A	C	D	F	G	Limb volume A	Unaffected	% difference
Baseline	17.5	17.5	25	29	31.5	2329	1954	+19%
After 2 weeks	17	15.8	24	27.5	31	2139	1953	+8%



through her teenage years with bilateral lower leg oedema and recurrent episodes of cellulitis.

On initial assessment, there was evidence of bilateral lymphoedema below the knee, with both feet showing positive Stemmer's sign, mild hyperkeratosis and post-cellulitis skin discolouration on the left gaiter area. The left leg was 30% bigger than the right, with an ankle circumference of 31 cm and calf of 45 cm. There were distinct skin folds distorting the shape around her left ankle, as well as foot oedema, which was restricting footwear (Figure 4). The limb size also restricted clothing, and the patient was only able to wear very loose trousers or long skirts.

Initial advice of skin care, exercise, elevation and weight management were discussed, and 2 weeks of daily treatment were booked. Miss H was signed off work by her GP to enable her to attend the sessions. Daily treatment commenced in October 2018 and involved alternating days of MLD or intermittent compression using Haddendum LymphFlow Advance, followed by below-knee multi-layer compression bandaging. Due to the extensive fibrotic



Figure 5. Miss H wearing Comfiwave on the left leg

Comfiwave under Easywrap for 2 weeks to compare this with the previous Minkiderm/Easywrap combination (Figure 5).
The feedback after 2 weeks was that it was a much more comfortable garment combination to wear, and the combined Minkiderm/Easywrap...



Figure 6. Miss H's legs after using Comfiwave for 2 weeks




within
wave
tients'
to the
y were
improve
ment of
that this
gent or as
24 hours
efficacy in
decreasing
oedema and
gent, family

ent: a prospective
3-541. <https://doi.org/10.1016/j.jbv.2017.04.001>
ed sleep with using
Coman Nurs. 2017;
staker J. Examination
in tissue oxygenation
429-435. <https://doi.org/10.1016/j.jbv.2017.04.001>
© JovVita PwPb in a
the British Lymphology



Comfiwave® Under knæet

	KORT		NORMAL		LANG
S	CW1-AD2S	■	CW1-AD2R	■	CW1-AD2L
M	CW1-AD3S	■	CW1-AD3R	■	CW1-AD3L
L	CW1-AD4S	■	CW1-AD4R	■	CW1-AD4L
XL	CW1-AD5S	■	CW1-AD5R	■	CW1-AD5L

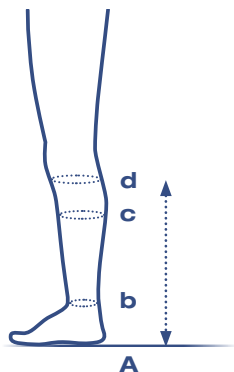

Omkreds cm		S	M	L	XL
c	BBREDESTE PUNKT PÅ LÆG	25 - 32	30 - 38	36 - 46	44 - 56
b	ANKEL	17 - 22	20 - 26	22 - 30	27 - 35
Længder cm		KORT	NORMAL	LANG	
A-d	KNÆSTRØMPE	32 - 37	37 - 42	42 - 48	



b
Ankel



c
Bredeste punkt
på læg




A-d
Gulv til 2 fingerbredder
under knæhasen



Comfiwave® Lårhøj

	KORT		NORMAL		LANG
S	CW1-AG2S	■	CW1-AG2R	■	CW1-AG2L
M	CW1-AG3S	■	CW1-AG3R	■	CW1-AG3L
L	CW1-AG4S	■	CW1-AG4R	■	CW1-AG4L
XL	CW1-AG5S	■	CW1-AG5R	■	CW1-AG5L

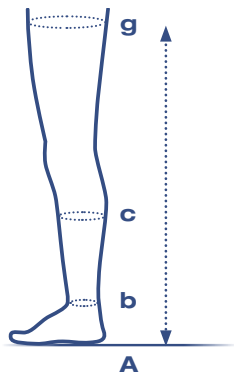

Omkreds cm		S	M	L	XL
g	TOPPEN AF LÅRET	40 - 48	46 - 56	54 - 65	62 - 75
c	BBREDESTE PUNKT PÅ LÆG	25 - 32	30 - 38	36 - 46	44 - 56
b	ANKEL	17 - 22	20 - 26	22 - 30	27 - 35
Længder cm		KORT	NORMAL	LANG	
A-g	LYSKESTRØMPE	64 - 70	70 - 77	77 - 84	



b
Ankel



c
Bredeste punkt
på læg



g
Toppen af låret



A-g
Gulv til toppen
af låret



Comfiwave® Ærme

KORT

NORMAL

S

CW1-CG2S



CW1-CG2R



M

CW1-CG3S



CW1-CG3R




L

CW1-CG4S



CW1-CG4R



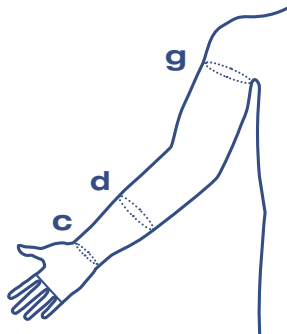

Omkreds cm		S	M	L
g	ARMHULE	25 - 30	30 - 40	40 - 50
d	MIDTEN PÅ UNDERARMEN	23 - 26	26 - 30	30 - 38
c	HÅNDELED	13 - 18	18 - 22	22 - 28

Længde cm

KORT

NORMAL

c-g ARMSTRØMPE

36 - 42

40 - 46



c
Håndled



d
Midt på
underarmen



g
Øverst på overarmen



c-g
Håndled til
armhulen

Comfiwave® Ærme med luffe

KORT

NORMAL

S

CW1-AG2S

CW1-AG2R

M


CW1-AG3S

CW1-AG3R

L

CW1-AG4S

CW1-AG4R

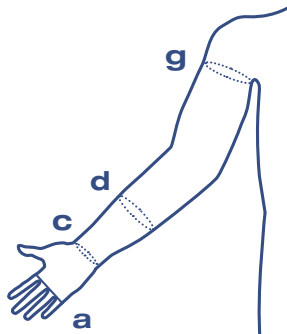

Omkreds cm		S	M	L
g	ARMHULE	25 - 30	30 - 40	40 - 50
d	MIDTEN PÅ UNDERARMEN	23 - 26	26 - 30	30 - 38
c	HÅNDLED	13 - 18	18 - 22	22 - 28
a	HÅNDFLADEN VED BUNDEN AF FINGRENE	16 - 22	18 - 24	20 - 26
Længde cm		KORT		NORMAL
c-g	ARMSTRØMPE MED HÅNDEL	36 - 42		40 - 46



a
Håndfladen
ved bunden af
fingrene



c
Håndled



d
Midt på
underarmen



g
Øverst på
overarmen



c-g
Håndfladen ved
bunden af fingrene
til armhulen

Comfiwave® Handske

NORMAL

S

CW1-ZE2

M

CW1-ZE3


Comfiwave® Fingervante

S

CW1-ZC2

M

CW1-ZC3

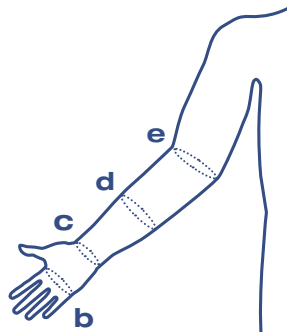

Omkreds cm		S	M
b	BUNDEN AF TOMMELFINGERBALLEN	17 - 22	20 - 25
c	HÅNDLED	14 - 20	16 - 24
d	MIDT PÅ UNDERARMEN	23 - 28	26 - 32

Længde cm		REGULAR
c-e	HÅNDLED TIL ALBUE KUN HANDSKE	20 - 24



b
Bunden af
tommelfingerballen



c
Håndled



d
Midt på
underarmen



c-e
Håndled til albue
KUN HANDSKE




Comfiwave® Mavebånd

M	CW1-HT3	■
L	CW1-HT4	■




Comfiwave® Lår med hofte

	KORT		NORMAL	
S	CW1-ET2S	■	CW1-ET2R	■
M	CW1-ET3S	■	CW1-ET3R	■
L	CW1-ET4S	■	CW1-ET4R	■
XL	CW1-ET5S	■	CW1-ET5R	■

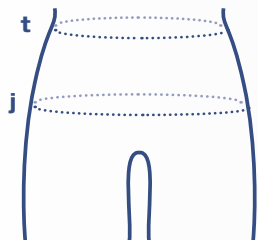

Omkreds cm		M	L
t	TALJE	60 - 70	70 - 85
j	HOFTER	80 - 90	90 - 105

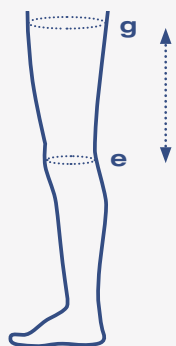

Omkreds cm		S	M	L	XL
g	TOPPEN AF LÅRET	40 - 48	46 - 56	54 - 65	62 - 75
e	KNÆ	27 - 35	33 - 39	41 - 50	48 - 60


Længde cm		KORT	NORMAL
e-g	LÅRSTRØMPE	20 - 26	25 - 31





Comfiwave® Brystbånd

	NORMAL	
S	CW1-TN2	■ ■ ■
M	CW1-TN3	■ ■ ■
L	CW1-TN4	■ ■ ■
XL	CW1-TN5	■ ■ ■

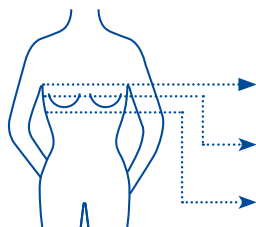

Omkreds cm	S	M	L	XL
OVER BRYST	70 - 88	80 - 102	90 - 116	100 - 130
PÅ BRYST	70 - 92	80 - 108	90 - 126	100 - 144
UNDER BRYST	70 - 80	80 - 92	90 - 104	100 - 116



Over bryst



På bryst



Under bryst

Dansk distributør:

Specialbandager.dk A / S

Bindeledet 10
2880 Bagsværd
Danmark

Telefon: 4444 8850

E-mail: info@specialbandager.dk
www.specialbandager.dk

Comfiwave[®]

Haddenham Healthcare Ltd
Crendon House, Crendon Industrial Park
Long Crendon, HP18 9BB
United Kingdom



www.comfiwave.info



01844 208842



sales@hadhealth.com